

Easy Clean
maxx

Recomendável uso único

Não aceitamos trocas
caso o blister esteja rompido

NON
STERILE

Esterilizar conforme
instrução de uso

3 anos a partir
da data de fabricação

Rx Only

17°C | 62.6°F
27°C | 80.6°F

MD

STERILIZE

Formas de apresentação comercial do produto:

Embalagem em blister podendo conter 1, 2, 4, 6 ou 8 cavidades para acondicionamento individual do instrumento por cavidade, lacrado com papel grau cirúrgico ou tyvek. Caixa de papelão podendo conter 12, 30 ou 48 unidades de blisters, com variação de ponta de: 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm e tamanhos 25mm.

Indicação de Uso:

São indicados para limpeza dos condutos radiculares, para todos os tipos de canais radiculares com suas respectivas variações anatômicas (canais retos, curvos, amplos, atrésicos, achatados), cabendo seu uso em toda a extensão dos mesmos.

Especificações do Dispositivo Médico:

São indicados para limpeza dos condutos radiculares, para todos os tipos de canais radiculares com suas respectivas variações anatômicas (canais retos, curvos, amplos, atrésicos, achatados), cabendo seu uso em toda a extensão dos mesmos. Uso transitório de até 60 minutos de uso contínuo.

Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação:

Através do processo de rotação o instrumento realiza a limpeza dos contudos radiculares.

Modo de Uso do Produto:

O instrumento Easy Clean Maxx deve ser utilizado durante o procedimento de tratamento endodontico (canal) após a remoção da polpa do dente para promover a limpeza dos sistemas de canais radiculares. Ela realiza a limpeza por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito do instrumento no interior do canal, principalmente no terço apical. Deve ser acoplada a um contra ângulo odontológico ajustado para uma velocidade entre 10.000 a 15.000 rpms. Prazo de validade. 3 ANOS

Condições de Armazenamento:

A embalagem que contém o produto deve ser armazenada e mantida em local arejado, seco e ao abrigo de ações intempéries com temperatura entre 17° à 27°, fora do contato direto com luz solar.

Condições para Transporte:

A embalagem que contém o produto deve ser transportada com condições adequadas para armazenagem, seca, ao abrigo de luz e da ação de intempéries com temperatura entre 17° á 27.

Condições de Manipulação:


A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas na área odontológica.

Advertências:

- Não utilizar o produto, caso a embalagem esteja rasgada, furada, violada ou molhada;
- Produto de uso único;
- Descartar após o uso;
- Produto estéril;
- Mantenha o produto na sua embalagem original;
- Abrir somente quando for efetuar o procedimento.

Precauções:

- Verificar se a embalagem está em perfeitas condições antes do uso.
- Não utilizar produto com o prazo de validade vencido.
- O material deverá ser descartado adequadamente de acordo com as normas estabelecidas.

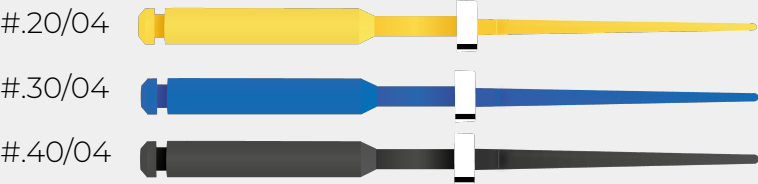

INSTRUCTIONS FOR USE



Easy Clean
maxx

Recommended for single use

We do not accept exchanges
if the blister is broken



Sterilize according
to instructions for use



3 years from date
of manufacture

Rx Only

17°C | 62.6°F
27°C | 80.6°F



MD



Commercial Presentation of the Product:

Blister packaging containing 1, 2, 4, 6, or 8 cavities for individual placement of the instrument per cavity, sealed with surgical-grade paper or Tyvek.

Cardboard box containing 12, 30, or 48 blister units, with tip size variations of: 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, and 25 mm in length.

Intended Use:

Indicated for the cleaning of root canals, for all types of root canals with their respective anatomical variations (straight, curved, wide, stenotic, flattened canals), suitable for use along their entire length.

Medical Device Specifications:

Indicated for the cleaning of root canals, for all types of root canals with their respective anatomical variations (straight, curved, wide, stenotic, flattened canals), suitable for use along their entire length.

Temporary use for up to 60 minutes of continuous operation.

Operating Principle / Mechanism of Action:

Through a rotational motion, the instrument performs cleaning of the root canals.

Instructions for Use:

The Easy Clean Maxx instrument must be used during the endodontic (root canal) treatment procedure after pulp removal to clean the root canal systems.

It performs cleaning through the mechanical agitation of chemical substances and the friction of the instrument inside the canal, especially in the apical third.

It must be attached to a dental contra-angle handpiece adjusted to a speed between 10,000 and 15,000 rpm.

Shelf life: 3 YEARS

Storage Conditions:

The product packaging must be stored in a well-ventilated, dry place, protected from weather conditions, at a temperature between 17°C and 27°C, and out of direct sunlight

Transport Conditions:

The product packaging must be transported under suitable storage conditions: dry, protected from light and weather conditions, at a temperature between 17°C and 27°C.

Handling Conditions:


Handling must be performed only by professionals specialized in the dental field.

Warnings:

- Do not use the product if the packaging is torn, punctured, broken, or wet.
- Single-use product.
- Discard after use.
- Sterile product.
- Keep the product in its original packaging.
- Open only at the time of the procedure.

Precautions:

- Check if the packaging is in perfect condition before use. Do not use the product if it is past its expiration date.
- The material must be properly discarded in accordance with established regulations.

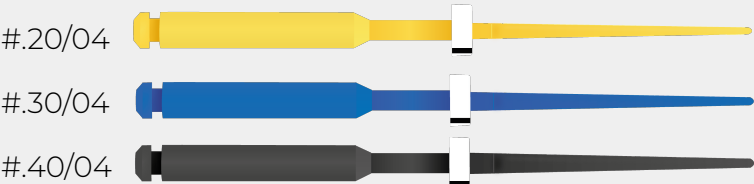

For dental use only



Fabricante | Manufacturer: Easy Equipamentos Odontológicos LTDA | CNPJ: 03.440.703/0001-29
R.T: Henrique A. Azevedo Bassi - CRD 13.540 | Rua Barão de Paraopeba, nº230.
Jardimópolis - CEP | ZIP Code: 30532-150, Belo Horizonte/MG, Brasil.
SAC | Customer Service: +55 (31) 3328-5550. Aut. Func./MS: 8.01.041-4
Indústria Brasileira | Brazilian Industry.

Rev.: 00 E-PJ-894

Presentación Comercial del Producto:

Envase tipo blister con 1, 2, 4, 6 u 8 cavidades para el acondicionamiento individual del instrumento por cavidad, sellado con papel grado quirúrgico o Tyvek. Caja de cartón con 12, 30 o 48 unidades de blisters, con variaciones de punta de: 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,35 mm y longitud de 25 mm.

Indicación de Uso:

Indicados para la limpieza de los conductos radiculares, para todo tipo de canales radiculares con sus respectivas variaciones anatómicas (canales rectos, curvos, amplios, atrésicos, aplanados), siendo adecuado su uso a lo largo de toda su extensión.

Especificaciones del Dispositivo Médico:

Indicados para la limpieza de los conductos radiculares, para todo tipo de canales radiculares con sus respectivas variaciones anatómicas (canales rectos, curvos, amplios, atrésicos, aplanados), siendo adecuado su uso a lo largo de toda su extensión. Uso transitorio de hasta 60 minutos de uso continuo.

Principio de Funcionamiento / Mecanismo de Acción:

A través del movimiento rotatorio, el instrumento realiza la limpieza de los conductos radiculares.

Modo de Uso del Producto:

El instrumento Easy Clean Maxx debe utilizarse durante el procedimiento de tratamiento endodóntico (conducto) tras la remoción de la pulpa dental, para promover la limpieza de los sistemas de canales radiculares.

Realiza la limpieza mediante la agitación mecánica de las sustancias químicas y el roce del instrumento en el interior del canal, especialmente en el tercio apical.

Debe acoplarse a un contraángulo odontológico ajustado a una velocidad entre 10.000 y 15.000 rpm.

Fecha de vencimiento: 3 AÑOS

Condiciones de Almacenamiento:

El embalaje que contiene el producto debe almacenarse y mantenerse en un lugar ventilado, seco y protegido de las inclemencias del tiempo, con una temperatura entre 17°C y 27°C, fuera del contacto directo con la luz solar.

Condiciones para el Transporte:

El embalaje que contiene el producto debe transportarse en condiciones adecuadas de almacenamiento: seco, protegido de la luz y de las inclemencias del tiempo, con temperatura entre 17°C y 27°C.

Condiciones de Manipulación:

La manipulación debe ser realizada únicamente por personas especializadas en el área odontológica.

Advertencias:

- No utilizar el producto si el envase está rasgado, perforado, violado o mojado.
- Producto de un solo uso.
- Desechar después del uso.
- Producto estéril.
- Mantener el producto en su envase original.
- Abrir únicamente en el momento de realizar el procedimiento.

Precauciones:

- Verificar que el envase esté en perfectas condiciones antes del uso. No utilizar el producto si está vencido.
- El material debe ser desechado adecuadamente conforme a las normas establecidas.

