

 Easy Bassi™

Catálogo de
PRODUTOS



QUEM SOMOS

Produzimos as mais avançadas limas endodônticas de NiTi do mundo, garantindo qualidade e segurança ao dentista e endodontista no uso do instrumento.

Nossa linha de produtos inclui limas rotatórias, reciprocantes, manuais, equipamentos e diversos acessórios para entregar uma solução completa ao dia a dia do endodontista.

Com uma equipe altamente capacitada e uma infraestrutura de última geração, dentro de rigorosos padrões internacionais, somos uma referência de padrão mundial.



Focados em
inovação



Compromisso com
a qualidade



Empresa 100%
brasileira



Uma história de
sucesso

EQUIPAMENTOS

iRoot Pro

- Localizador apical integrado;
- Rotatório e reciprocante;
- Compatível com todas as limas do mercado;
- Bateria recarregável de longa duração;
- Fácil operação e leve.



- Contra-ângulo com cabeça mini, *Push Button*, autoclavável, diversas possibilidades de posição e fácil manutenção;
- Acionamento sem pedal;
- 10 opções de programas, com ajuste de torque, velocidade e tipo de movimento (reciprocante);
- Programa reciprocante com ângulos diferentes e velocidades variadas (Esquerda e Direita);
- Velocidades variando de 150 RPM a 950 RPM;
- Torques programáveis de 0,6 Ncm e 4,3 Ncm;
- Programável para operadores destros e canhotos.

iRoot

- Rotatório e reciprocante;
- Compatível com todas as limas do mercado;
- Bateria recarregável de longa duração;
- Fácil operação.



Apex

- Precisão e confiabilidade;
- Tela LCD 3,5 polegadas;
- Opção de limite apical;
- Alarme sonoro;
- Bateria de Íon Lítio de longa duração;
- Giroscópio automático.


Easy Fill

- Indicado para obturação dos canais radiculares, injetando Gutta Percha aquecida fluida durante o tratamento de canal;
- Fácil e conveniente;
- Design sem fio;
- Aderência mais confortável;
- Controle de temperatura preciso.



Easy Pack

- Obturação do canal radicular durante o tratamento do canal radicular, fornecendo calor para amaciar, cortar e pressurizar a Gutta Percha;
- Design sem fio;
- Conveniência para operar e mais abrangente;
- Mecanismo de proteção de segurança para parar automaticamente após 5s de aquecimento contínuo.

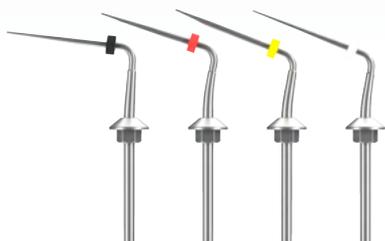

Limas




Rotatórias
Reciprocantes
Para Retratamento
Manuais em NiTi
Manuais em Aço




LIMAS ROTATÓRIAS

Logic

- Limas para instrumentação mecanizada rotatória dos canais radiculares;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Maior poder de corte, instrumento com alto desempenho;
- Pode ser usada em qualquer motor;
- Menos desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz;
- Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal;
- Disponíveis nos comprimentos 21, 25 e 31 milímetros.

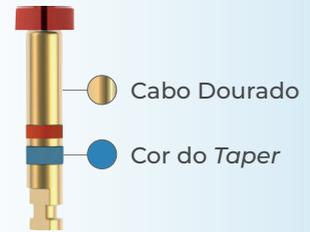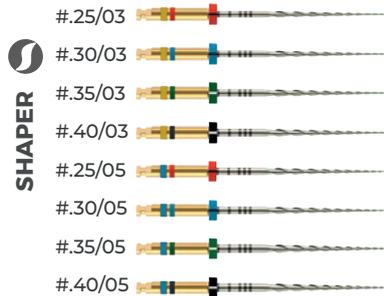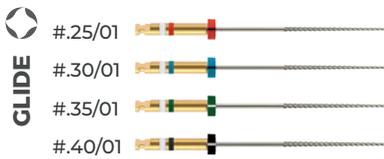

Taper
Novas cores

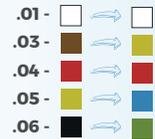

Nova identificação de cor do taper

Logic Sequence



- Limas para instrumentação mecanizada rotatória dos canais radiculares;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Facilita o entendimento, operação e uso das limas Logic;
- Apresentada em *blisters* de 04 limas usadas em sequência;
- Atendem a todas as anatomias dentárias;
- Menos desgaste desnecessário da dentina nos terços médio e cervical de raiz;
- Marcação de profundidade que facilita o trabalho de identificação dentro do canal;
- Altíssima eficiência de corte;
- Disponíveis nos comprimentos 21, 25 e 31 milímetros.

Sequence 1 Logic



Sequence 2 Logic



Limas S2

- O sistema de limas rotatórias S2 é a solução completa para seu tratamento endodôntico;
- Potencializa a remoção de debris evitando a sua compactação, promovendo mais segurança e eficiência no seu atendimento;
- Simples, eficiente e segura;
- Kit com 3 limas (Sequência: 1 *Orifice Shaper* | 1 *Glide Path* | 1 *Shaper*);




SEQUÊNCIA DE 3 LIMAS

1 *orifice shaper*, 1 *glide path* e 1 *shaper*

KITS DISPONÍVEIS

KIT AMARELO

#.15/10 17mm

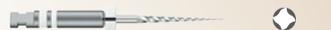

#.15/03 25mm




#.20/04 25mm



KIT VERMELHO

#.15/10 17mm

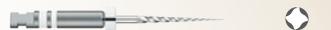

#.15/03 25mm



#.25/06 25mm



KIT VERDE

#.15/10 17mm




#.15/05 25mm



#.35/04 25mm



Lima S

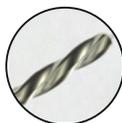

PONTAS INATIVAS

- Limas para instrumentação rotatória mecanizada dos canais radiculares;
- Sistema simples e fácil de aplicar no dia a dia clínico;
- Kit com 4 unidades iguais ou sortidas;
- Baixo custo;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Disponíveis nos comprimentos 21, 25 e 31 milímetros.

#.30/10



#.25/01



#.25/08




#.25/06



X-Taper



- Limas para instrumentação rotatória;
- Velocidade mais alta (600 RPM's);
- Kit com 6 unidades sequenciais;
- Alto ciclo de fadiga;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Disponíveis nos comprimentos 21mm, 25mm e 31 mm.

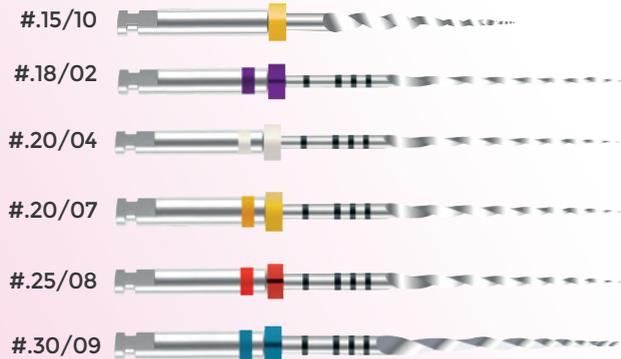

LIMA PARA RETRATAMENTO

Lima RT

- Sistema de limas para retratamento endodôntico;
- Blister com 4 limas iguais ou 3 sortidas;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Disponíveis nos comprimentos 21 e 25 milímetros.



LIMAS RECIPROCANTE

R-Plus+




- Lima recíproca para tratamento endodôntico;
- Recíproca para esquerda/anti-horário;
- Secção transversal dupla hélice com ângulos constantes;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- O *Glide Plus*, o instrumento consiste em uma lima de ponta 0.15 e *taper* .04, que possibilita negociação de patência com eficiência de mercado;
- Disponíveis nos comprimentos 21 mm, 25 mm e 31mm.



Lima R



- Lima recíproca para tratamento endodôntico;
- Recíproca para esquerda/anti-horário;
- Secção transversal hélice dupla;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Velocidade: 400 RPM em ciclos;
- Ângulo: 270° para esquerda - 30° para direita;
- Disponíveis nos comprimentos 21 mm e 25 mm.

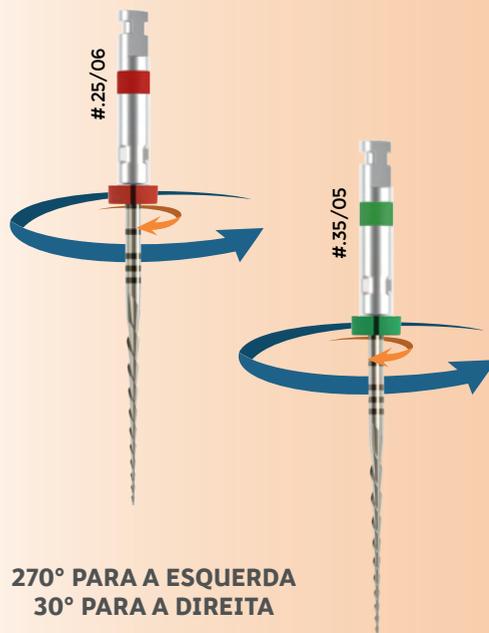


**270° PARA A ESQUERDA
30° PARA A DIREITA**

LIMAS MANUAIS EM NITI

Lima M




- Lima para instrumentação manual em NiTi;
- Blister com 6 ou 2 unidades iguais ou sortidas;
- Dispensa o uso de *Gates Glidden* e das Limas de Aço 1º e 2º séries;
- Baixa curva de aprendizado;
- Tratamento térmico CM (*Controlled Memory*);
- Indicado para Clínicos Gerais e estudantes de Odontologia;
- Mesma lâmina presente na Logic com cabo de maior diâmetro para adaptar-se ao uso manual;
- Disponíveis nos comprimentos 21 e 25 mm e nos tapers: .03 e .05;
- *Orifice Shaper*: #.15/08 19mm, #.15/10 17mm.

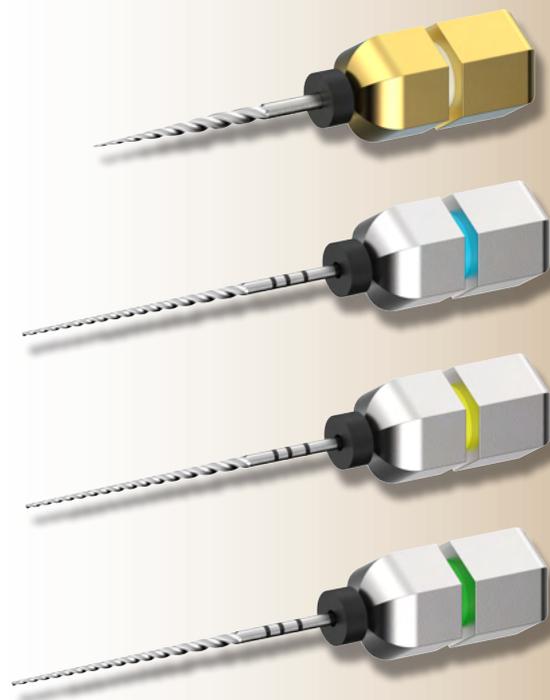


ORIFICE SHAPER



SHAPER #.03

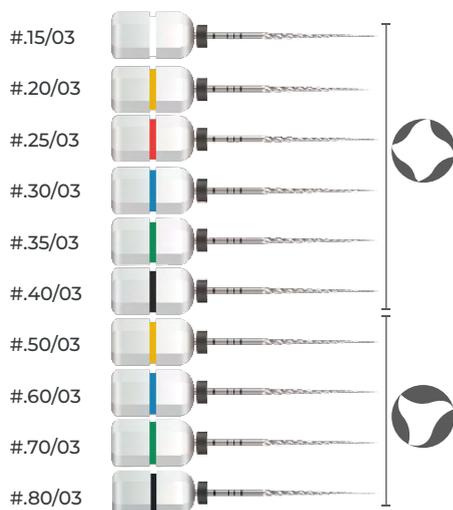

SHAPER #.05

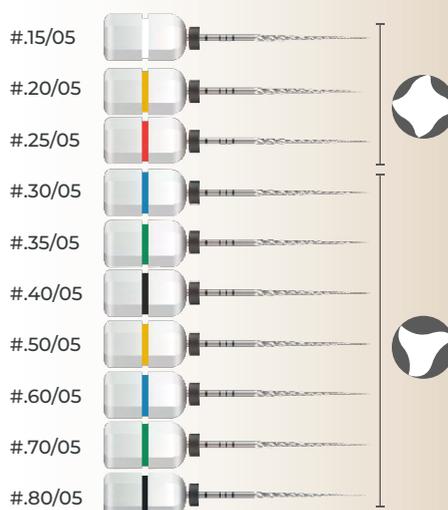

LIMAS MANUAIS EM AÇO

Target 5



- Secção transversal pentagonal;
- Produzida exclusivamente nos diâmetros #.08, #.10, #.15;
- Disponível nos comprimentos 21 e 25mm;
- Com marcação de profundidade para melhor identificação do operador;
- Área de núcleo interno 30% maior;
- *Blister* com 6 unidades iguais;
- Produzida em aço, possui tratamento térmico para aumento a resistência à flexão;
- Melhor opção do mercado para a negociação de patência e canais atrésicos e/ou calcificados.



Target C



- Limas para patência desenvolvidas para negociação dos canais radiculares;
- Produzida nos diâmetros #.06, #.08, #.10, #.15;
- Alta resistência à flexão (flambagem);
- Com marcação de profundidade para melhor identificação do operador;
- Com cursor de silicone;
- *Blister* com 6 unidades iguais;
- Melhor opção do mercado para a negociação de patência e canais calcificados;
- Disponíveis nos comprimentos 21mm e 25mm.



A Target possui ângulos helicoidais suaves que permitem uma negociação efetiva, criando o *Glide Path* e patência dos canais radiculares.

Target K



- Instrumento de aço inoxidável de alta qualidade, proporcionando maior durabilidade;
- Empregado para preparo químico-mecânico dos canais radiculares;
- Possui secção transversal quadrangular, resultando em bastante flexibilidade, resistência e poder de corte;
- Pode ser utilizada em todas as técnicas de tratamento endodôntico;
- Disponíveis nos comprimentos 21mm e 25mm;
- *Blister* com 6 unidades sortidas.



PRODUTOS QUÍMICOS



Sealtemp

- Não possui Eugenol e tem sabor e aroma agradáveis;
- Fácil utilização e remoção, além de vasta aplicação em procedimentos clínicos restauradores;
- Grande aderência, garante isolamento marginal eficaz e rápido endurecimento ao contato com a saliva;
- O produto se apresenta com 01 Frasco (25g).



Easyseal

- Garante uma vedação adequada dos canais radiculares, prevenindo reinfecções;
- Ação antimicrobiana: O Eugenol oferece ação bactericida, contribuindo para a saúde do canal;
- Simples e rápido de aplicar, facilitando o trabalho do profissional;
- Biocompatível: Bem tolerado pelos tecidos periapicais, minimizando riscos de reações adversas;
- O produto se apresenta com 01 Frasco de Cimento Endodôntico em pó (12g), 01 Frasco Cimento Endodôntico líquido (10mL) e 01 colher medidora.



EDTA Trissódico 18% Líquido

- É um agente quelante, utilizado no interior da cavidade pulpar para o preparo das paredes dos canais radiculares;
- Facilita a dissolução e remoção eficiente da lama e raspas dentinárias, aumenta a permeabilidade da dentina e viabiliza a aderência do tecido conjuntivo tratado na superfície radicular em terapia periodontal.
- O produto se apresenta por meio de 1 frasco com 20 ml.



Superdam

- Oferece rápida polimerização e uma cor que contrasta claramente com os tecidos orais, facilitando a visualização durante o procedimento;
- Sua formulação permite uma remoção fácil e rápida, minimizando o desconforto e otimizando o tempo clínico;
- Temperatura de armazenagem: 5 – 28 (°C);
- O produto se apresenta por meio de 1 seringa com 2 gramas e 3 cânulas.



Curetemp

- Restaurador Temporário Fotopolimerizável à base de resina dimetacrilatos e não contém Eugenol;
- É utilizado para reembasamentos de provisórios acrílicos pré-fabricados. Aplicável em coroas e pontes;
- O produto se apresenta por meio de 1 seringa contendo 3 gramas.



Easyslide

- É um gel lubrificante hidrossolúvel à base de peróxido de carbamida;
- Usado em conjunto com o hipoclorito de sódio para liberar oxigênio, facilitando a soltura de fragmentos pulpares e auxiliando na penetração dos instrumentos de limpeza;
- O produto se apresenta por meio de 1 seringa e 2 cânulas.



Lumiglass

- É um compósito de ionômero de vidro forrador, fotopolimerizável e pronto para uso
- Indicado para forramento cavitário sob todos os tipos de materiais restauradores, selamento de fôssulas e fissuras estendidas, restauração de pequenas lesões e de defeitos em reparos, sendo ideal para procedimentos pediátricos.
- O produto se apresenta por meio de 1 seringa contendo 2,5g e 3 pontas aplicadoras.

Accesórios

Lençol de Borracha

Cones de Gutta Percha

Cânula Irrigadora

Multi Tips

Easy Clean Maxx

Modelo em Resina para Treinamento

Endodôntico

Modelo em Resina para Treinamento

Endodôntico (Dentes)

Kit de Condensadores de NiTi

Flex Pack

Cone de Papel

Cone de Gutta Percha




Lençol de Borracha

CORES DISPONÍVEIS



- Para isolamento absoluto do dente;
- Alta resistência e elasticidade;
- Embalagem contém 36 unidades de uma mesma cor;
- Disponíveis nas cores: azul, preto, roxo, verde e rosa;
- Tamanho: 15x15 cm.

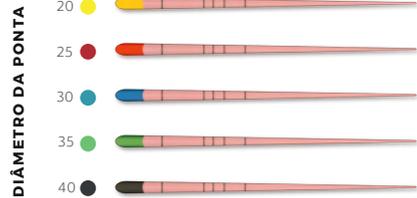

Cone de Gutta Percha

- Cones de Gutta Percha com alta precisão e radiopacidade;
- Cones com alta plasticidade facilitando técnicas termoplásticas em canais curvos;
- Cone de Gutta Percha de acordo com o Tip/Taper;
- Caixa com 60 unidades iguais;
- Numerações únicas disponíveis: #.20/03, #.20/04, #.20/05, #.25/03, #.25/04, #.25/05, #.25/06, #.30/03, #.30/05, #.35/03, #.35/05, #.40/03, #.40/05.



Cânula Irrigadora

- Cânula irrigadora com saída lateral de líquido para possibilitar uma irrigação apical segura, diminuindo a possibilidade de extravasamento da solução irrigadora;
- Corpo flexível facilitando a entrada no canal;
- Não estéril;
- Embalagem com 50 ou 100 unidades;
- Cursor para medir o comprimento;
- Disponível no comprimento 26mm.
- Tamanho: 30G.




Multi Tips

- Pontas para irrigação/aspiração;
- Não estéril;
- Descartáveis, de uso único;
- Flexível;
- Material de polipropileno;
- Abas que facilitam a colocação e remoção em seringas hipodérmicas;
- Diâmetro de 0,25 e 0,35mm;
- Embalagem contendo 20 unidades;
- Disponíveis nas cores branca (0,25mm) reto ou angular e azul (0,35mm) reto ou angular para facilitar na hora do uso.



Easy Clean Maxx

- O Easy Clean Maxx combina a eficiência de tecnologias avançadas com a simplicidade, resolvendo problemas associados aos sistemas ultrassônicos e laser;
- Aumenta a segurança de uso, reduzindo significativamente os riscos de rompimento durante o procedimento;
- Disponível em três opções de diâmetros (#.20, #.30 e #.40 mm) com taper .04, o Easy Clean Maxx permite ao operador adaptar o dispositivo à anatomia específica de cada canal preparado;
- Tamanho reduzido: 6 mm mais curto, o Easy Clean Maxx facilita a inserção em regiões posteriores da arcada, melhorando a usabilidade em situações desafiadoras;
- Cada diâmetro é identificado por uma cor específica (amarelo, azul e preto), proporcionando mais praticidade ao profissional.

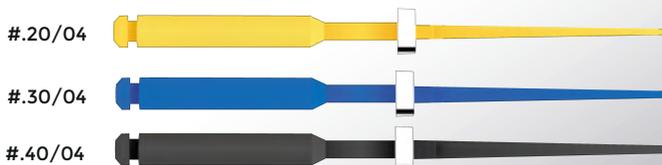

Modelo em Resina para Treinamento Endodôntico

- Bloco em resina para treinamento;
- Apresentam três canais, simulando um dente com três canais de curvaturas variadas, sendo que um deles na maioria das vezes é reto representando um canal palatino de molar superior, os outros dois representam os canais radiculares desses molares;
- Caixa com 4 unidades;
- Grau de dificuldade elevado sendo indicado para quem quer dominar o uso e cinemáticas das limas;
- A resina faz com que o efeito de parafusamento naturalmente causado pela lima aumente. Ao trabalhar com bloquinhos, a irrigação é muito importante, desta forma, o bloquinho não esquenta e a resina não derrete, evitando a fratura da lima.

Modelo em Resina para Treinamento Endodôntico (Dentes)

- Reprodução fiel do acesso coronário, permitindo que os alunos pratiquem a abertura inicial do dente;
- Coloração diferenciada no interior dos canais, simulando a polpa dentária, proporciona uma visualização clara dos objetivos clínicos e dos desafios anatômicos;
- Os modelos em resina estão disponíveis em 4 unidades em uma caixa de acrílico;
- Diferentemente dos dentes naturais, que apresentam desafios logísticos e de biossegurança, os modelos de resina podem ser reutilizados, permitindo repetição ilimitada e análise detalhada de erros e acertos.



Kit Condesadores de NiTi

- Para condensação dos canais radiculares;
- Ideal para canais curvos e elípticos;
- Diâmetros precisos;
- Condesadores duplos;
- Cabos ergonômicos;
- Pontas de NiTi calibradas;
- Kit 4 condesadores sortidos.

CORES	PONTAS
VERDE	• #35 #70
PRETO	• #40 #80
AMARELO	• #50 #100
AZUL	• #60 #120



Flex Pack

- Desenvolvido em Liga de NiTi;
- Instrumento que promove obturação segura;
- Usado também na Técnica de Tagger;
- Compactação tridimensional;
- Design de hélices invertidas;
- Usado em motores elétricos ou acionados a ar;
- Caixa com 3 limas iguais ou 3 sortidas.

#.35/02



#.40/02



#.45/02



Cone de Papel

- Usado para secagem dos canais radiculares;
- Segurança para uso imediato;
- Cell Pack individuais e esterilizados em óxido de etileno;
- 5 unidades adequados para 1 tratamento;
- Cores de identificação de tamanho.



Cone de Gutta Percha

- Cones de Gutta Percha embalados individualmente em Cell Pack.
- Uso imediato, pois já vem esterilizado;
- Mantém a integridade do cone dentro da célula;
- Alta qualidade.

#JeitoEasyBassi de fazer negócios

CANAL DE ATENDIMENTO

 @easybassi

 **inf** easybassi

 (31) 3328-5550

 (31) 97122-8736

 easybassi.com.br

