

A large, stylized red graphic composed of two overlapping rounded shapes, resembling a thick, curved arrow or a stylized letter 'B', dominates the right side of the page.

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Tecnologia e precisão para
cada etapa da endodontia

Quem somos

Produzimos as mais avançadas limas endodônticas de NiTi do mundo, garantindo qualidade e segurança ao cirurgião dentista e endodontista no uso do instrumento.

Nossa linha de produtos inclui limas rotatórias, reciprocantes, manuais, equipamentos e diversos acessórios para entregar uma solução completa ao dia a dia do endodontista.

Com uma equipe altamente capacitada e uma infraestrutura de última geração, dentro de rigorosos padrões internacionais, somos uma referência de padrão mundial.

FOCADOS EM INOVAÇÃO

Juntamente com um corpo técnico de excelência estamos constantemente desenvolvendo novas tecnologias. Respiramos inovação e buscamos sempre trazer as melhores ferramentas para auxiliar endodontistas do mundo inteiro.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE

Na **Easy Bassi**, acreditamos que a excelência em cuidados odontológicos começa com a confiança. Por isso, nos orgulhamos de nossas certificações, que atestam nosso compromisso com os mais altos padrões de qualidade e segurança.

Nossa equipe é composta por profissionais altamente qualificados e certificados pelos principais órgãos reguladores do setor.

EMPRESA 100% BRASILEIRA

A **Easy Bassi** é uma empresa nacional criada em 1999 pelo Dr. Henrique Bassi, em parceria com o apoio técnico de um grupo seletivo de endodontistas. Com o avanço da endodontia brasileira, expandimos a marca para comercializar nossos produtos no exterior.

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

A história da **Easy Bassi** se mistura com o avanço da endodontia brasileira, reconhecidamente uma das melhores do mundo. Por isso, não hesitamos em buscar o que existe de melhor para os nossos produtos e clientes.

Precisão que se sente na prática

Motores, localizadores e equipamentos com a tecnologia que eleva cada atendimento a mesma excelência.

MOTORES ENDODÔNTICOS

LOCALIZADOR APICAL

OBTURAÇÃO



NEORoot

VERSATILIDADE PARA ACOMPANHAR
O SEU PROTOCOLO.

O NeoRoot foi desenvolvido para oferecer praticidade, precisão e controle durante a instrumentação endodôntica. Compatível com todas as limas do mercado, combina diferentes modos de operação, configurações personalizáveis e um design ergonômico que proporciona mais conforto e eficiência em cada procedimento.



- Menor vibração do mercado
- Leve, sem pedal, fácil operação
- Compatibilidade com todas as limas
- Rotatório, recíprocante e ATC
- Funções avançadas
- Velocidade de 100 a 2200 RPM, torque de 0,6 a 5,0 Ncm
- 10 programas configuráveis

Veja o protocolo de uso em vídeo.
Aponte a câmera e veja o NeoRoot em ação



NEORoot Pro

MOTOR ENDODÔNTICO

ONDE A SUA ENDODONTIA
ENCONTRA A EXCELÊNCIA.

Este é o motor endodôntico mais completo do nosso portfólio, desenvolvido para quem exige o máximo em performance, tecnologia e resultado clínico.

O **NeoRoot Pro** incorpora todas as funcionalidades já consagradas do NeoRoot e vai além: conta com localizador apical integrado, unificando em um só equipamento a instrumentação rotatória/recíprocante e a localização foraminal com precisão e segurança. O resultado? Um motor mais completo, prático e eficiente, feito para elevar o padrão da sua rotina clínica.

- Menor vibração do mercado
- Localizador Apical Integrado
- Compatibilidade com todas as limas
- Rotatório, recíprocante e ATC
- 10 programas ajustáveis de torque e velocidade
- Bateria recarregável de longa duração
- Funções avançadas



Veja o protocolo de uso em vídeo.
Aponte a câmera e veja o NeoRoot Pro em ação

XRoot Pro

MOTOR ENDODÔNTICO

DOIS EQUIPAMENTOS.
UMA ÚNICA SOLUÇÃO.

O **XRoot Pro** combina motor endodôntico e localizador apical integrado em um equipamento desenvolvido para proporcionar mais controle, segurança e eficiência durante a instrumentação. Compatível com todas as limas do mercado, oferece modos rotatório e reciprocante, programas personalizáveis e uma interface intuitiva para acompanhar diferentes técnicas clínicas.

- Localizador Apical Integrado
- Compatibilidade com todas as limas
- Rotatório e reciprocante
- Controle preciso durante toda a instrumentação
- Bateria recarregável de longa duração



Veja o protocolo de uso em vídeo.
Aponte a câmera e veja o XRoot em ação



XRoot

SIMPLES DE OPERAR.
IMPOSSÍVEL DE IGNORAR.

O **XRoot** foi desenvolvido para proporcionar controle, precisão e praticidade durante a instrumentação dos canais radiculares. Compatível com todas as limas do mercado, reúne modos rotatório e reciprocante, configurações personalizáveis e um design leve e ergonômico para atender às diferentes necessidades da prática clínica.

- Compatibilidade com todas as limas
- Rotatório e reciprocante
- Acionamento sem pedal
- Velocidade de 150 a 1000 RPM, torque de 0,6 a 4,0 Ncm
- Leve e ergonômico

Veja o protocolo de uso em vídeo.
Aponte a câmera e veja o XRoot em ação



Easy Pex

LOCALIZADOR APICAL FORAMINAL

TECNOLOGIA PARA QUEM BUSCA EXCELÊNCIA EM ENDODONTIA.

O **Easy Pex** é um localizador apical foraminal desenvolvido para auxiliar na determinação do comprimento de trabalho durante o tratamento endodôntico. Com tecnologia de ponta, interface intuitiva e alta precisão, oferecendo mais previsibilidade em cada procedimento.



- Alta precisão e confiabilidade
- Tela LCD de 3,5" com amplo ângulo de visão

- Alarme sonoro de 2,2mm do ápice
- Multifrequência
- Bateria de íon-lítio de longa duração



Veja o protocolo de uso em vídeo.

Easy Fill

OBTURE COM MAIS PRECISÃO.
TRABALHE COM MAIS CONFIANÇA.



O **Easy Fill** foi desenvolvido para proporcionar uma aplicação precisa e uniforme de guta-percha aquecida durante a obturação dos canais radiculares.

Com design ergonômico, funcionamento sem fio e controle preciso de temperatura, oferece mais conforto, agilidade e segurança para a rotina clínica.



Veja o protocolo de uso em vídeo.

Easy Pack

PRECISÃO QUE VOCÊ SENTE.
CALOR QUE VOCÊ CONTROLA.

O **Easy Pack** foi desenvolvido para realizar o corte e a compactação da guta-percha aquecida durante a obturação dos canais radiculares.



Com design ergonômico, operação sem fio e controle preciso de temperatura, proporciona mais eficiência, conforto e segurança em cada procedimento.

Veja o protocolo de uso em vídeo.





LIMAS

O corte certo para cada caso

Flexibilidade e resistência à fadiga em cada lima -
a consistência técnica que sustenta o seu protocolo
do início ao fim.

ROTATÓRIAS

RECIPROCANTES

MANUAIS



Os produtos **Easy Bassi** se dividem em dois momentos do tratamento endodôntico: **negociação inicial**, que abre e explora o canal, e **instrumentação**, que modela e alarga o canal já explorado. Na Easy, a precisão manual e a tecnologia mecanizada se complementam em cada etapa do preparo endodôntico.

ONDE CADA ETAPA ENTRA NO TRATAMENTO



PATÊNCIA/ACESSO

Exploração do canal

MANUAL

LIGA AÇO INOX

Target C

Target 5

MECANIZADA

ROTATÓRIO CONTÍNUO

LIGA NITI

Logic Taper .01

25.01

50.01

MECANIZADA

RECIPROCANTE

LIGA AÇO INOX

Target R

INSTRUMENTAÇÃO

Modelagem e conformação do canal

MANUAL

LIGA AÇO INOX

Target K

Lima M

MECANIZADA

ROTATÓRIO CONTÍNUO

LIGA NITI

Logic

Logic
Sequence

S2

S

X-Taper Go

Simplex

X-Finder

MECANIZADA

RECIPROCANTE

LIGA NITI

R-Plus

R

Revox

R-Plus MI

Limas Logic Files


ALTA PERFORMANCE

INSTRUMENTAÇÃO

ROTATÓRIA

TECNOLOGIA QUE ENTENDE A ANATOMIA DO CANAL.

Desenvolvidas em liga metálica especial e com tratamento térmico CM (Controlled Memory), as limas Logic oferecem eficiência, segurança e preservação da anatomia natural. Trabalham entre 350 e 950 rpm, com torque recomendado de acordo com cada instrumento, proporcionando maior precisão e controle durante o preparo.

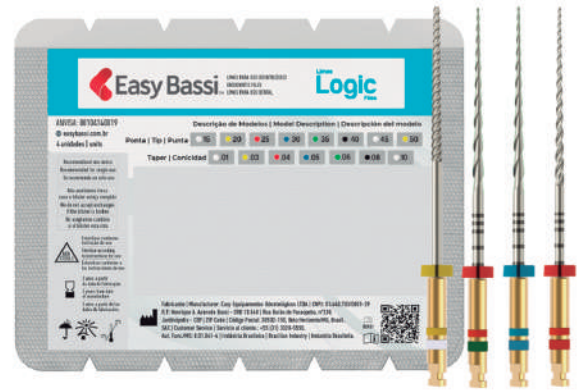

TRÊS COMPRIMENTOS
21mm | 25mm | 31mm




MAIOR CORTE
Mais eficiência em menos tempo.

MENOS DESGASTE
Preserva a dentina e a anatomia natural.

MARCAÇÃO PRECISA
Controle total da profundidade.

TRATAMENTO TÉRMICO CM
Mais flexibilidade e segurança.

ALTO DESEMPENHO
Maior poder de corte, com alto desempenho.

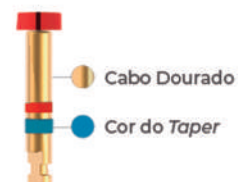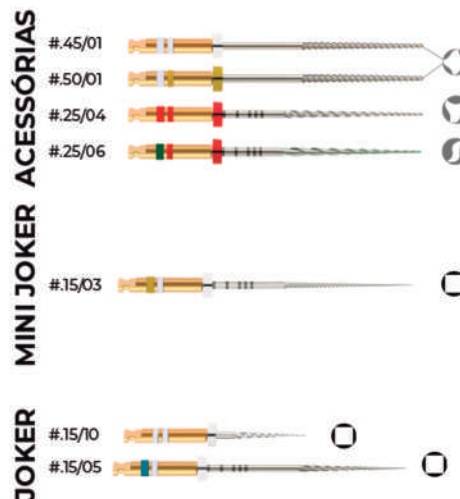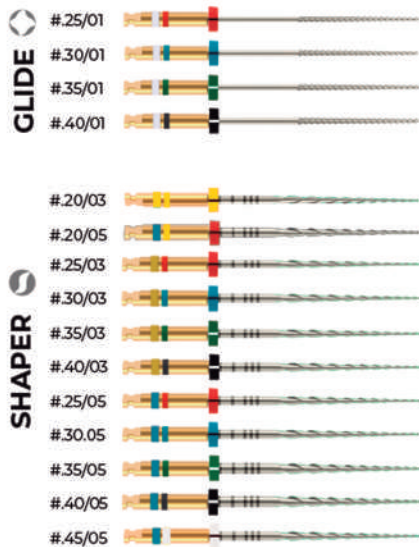

Taper
Novas cores

.01 -
.03 -
.04 -
.05 -
.06 -



INICIE COM SEGURANÇA. EVOLUA COM LIBERDADE.

A mesma lima Logic que você já usa, agora em embalagem sortida. Mesma qualidade, mesmo padrão - com ainda mais flexibilidade na hora de comprar.

Logic Sequence

SEQUÊNCIA 1



SEQUÊNCIA 2



Limas R-Plus⁺ Files

ALTA PERFORMANCE



INSTRUMENTAÇÃO

RECIPROCANTE

PERFORMANCE RECIPROCANTE EM UM NOVO NÍVEL.

Com seção transversal em S (dupla hélice), a **R-Plus⁺** proporciona corte eficiente, menor atrito e mais segurança durante a instrumentação. Pode ser utilizada em movimento rotatório ou recíprocante, operando entre 350 e 600 rpm, com torque de 2 N·cm e recíprocância de 150° à esquerda e 30° à direita.

Tecnologia que proporciona maior eficiência, segurança e previsibilidade em diferentes anatomias.

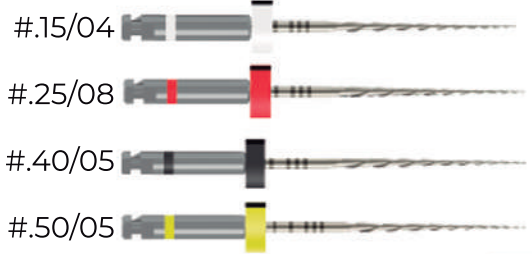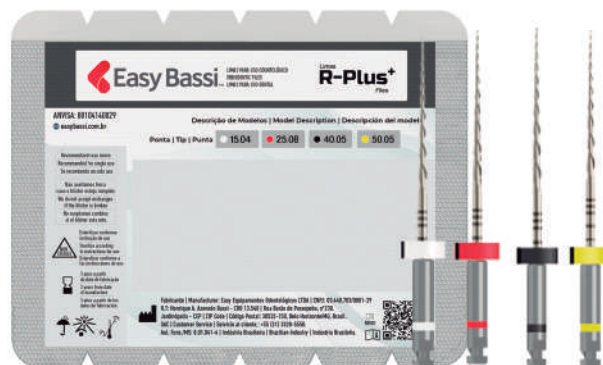

LANÇAMENTO

RECIPROCANTE

INSTRUMENTAÇÃO

Limas R-Plus⁺ MI Files

INTERVENÇÃO MÍNIMA. FLEXIBILIDADE QUE RESPEITA A ANATOMIA.

Desenvolvida a partir de fio de 0,8 mm, a **R-Plus⁺ MI** combina menor massa metálica e maior flexibilidade para acompanhar a anatomia com segurança e eficiência. Recomenda-se o uso entre 350 e 600 rpm, com torque de 2 N·cm e movimento recíprocante de 150° à esquerda e 30° à direita.

Com tratamento térmico dedicado ao fio de 0,8mm e tratamento duplo, a R-Plus⁺ MI une flexibilidade e eficiência em um único instrumento - engenharia própria para preparos conservadores, sem abrir mão da segurança e desempenho.



COMPLEMENTA A LINHA R-PLUS+ PADRÃO

A lima certa, mais uma vez.

PATÊNCIA

RECIPROCANTE

LANÇAMENTO

TARGET R



REDEFININDO A PATÊNCIA APICAL COM LIMAS DE AÇO MECANIZADAS

A **Target R** é a primeira lima de aço desenvolvida para uso mecanizado em movimento reciprocante, proporcionando segurança, previsibilidade e eficiência na negociação inicial e na patência apical. Opera entre 50 e 100 rpm, com torque de 0,5 a 2 N·cm e reciprocância de 20° à direita e 10° à esquerda.

- Patência mecanizada
- Maior segurança clínica
- Alta resistência à torção
- Excelente negociação inicial
- Redução do uso de limas manuais
- Economia no procedimento



PATÊNCIA

LANÇAMENTO

MV2

>X<-Finder

PRECISÃO PARA ENCONTRAR OS CAMINHOS MAIS DESAFIADORES.

Desenvolvida para localizar e explorar canais de difícil acesso, a **X-Finder** oferece precisão, controle e segurança nas etapas iniciais da instrumentação. Utilizada em movimento rotatório, opera a 350 rpm, com torque de 2 N·cm.



- Ideal para exploração de canais complexos e localização do MV2
- Pequena conicidade para maior controle e precisão
- Identificação rápida por código de cores
- Disponível em diferentes comprimentos
- Sequência objetiva para mais praticidade clínica

LANÇAMENTO

ROTATÓRIA

INSTRUMENTAÇÃO

Simplex

SIMPLICIDADE QUE POTENCIALIZA RESULTADOS.

A **Simplex** oferece uma instrumentação rotatória prática, eficiente e previsível, com maior controle e desempenho no preparo dos canais radiculares. Opera a 350 rpm, com torque de 2 N·cm.



#15/04



#20/04



#25/06



#35/04



- Lâmina com acabamento azul
- Cabo metálico na cor prata
- Identificação por canais coloridos (.02, .04 e .06)
- Cursor na cor correspondente ao instrumento

ROTATÓRIA



X-Taper Go

PERFORMANCE QUE ACOMPANHA CADA ETAPA DO PREPARO.

A **X-Taper Go** oferece uma sequência completa de instrumentos rotatórios para um preparo eficiente, preciso e previsível. Opera em movimento rotatório, a 350 rpm, com torque de 2 N·cm.

- Lâmina com acabamento dourado
- Cabo metálico na cor prata
- Canal do cabo com identificação por cores
- Organização intuitiva da sequência

#19/04



#17/02



#20/04



#20/07



#25/08



#30/09



RECIPROCANTE

LANÇAMENTO



RevoX

POTÊNCIA, CONTROLE E PRECISÃO EM MOVIMENTO RECIPROCANTE.

A **RevoX** oferece um preparo recíprocante seguro, eficiente e previsível, com resistência, flexibilidade e controle durante a instrumentação. Opera entre 350 e 600 rpm, com torque de 2 N·cm e movimento recíprocante de 150° à esquerda e 70° à direita.

#.20/07



#.25/07



#.35/06



#.45/05



- Lâmina com acabamento dourado
- Cabo na cor prata
- Canal do cabo colorido para rápida identificação do instrumento
- Cursor com a mesma cor correspondente ao instrumento



ALTA PERFORMANCE


RECIPROCANTE

INSTRUMENTAÇÃO

Limas

R

Files

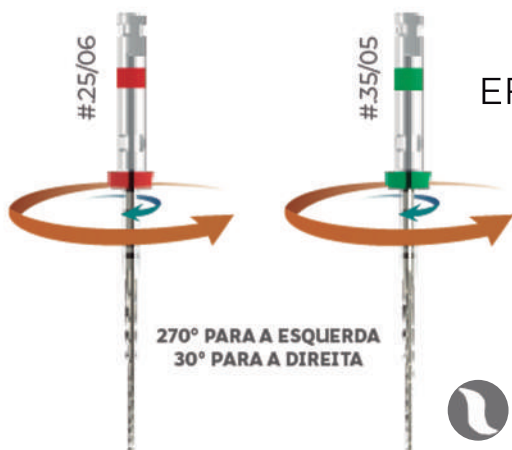

INSTRUMENTAÇÃO SIMPLIFICADA COM A EFICIÊNCIA DO MOVIMENTO RECIPROCANTE.

A **Lima R** foi desenvolvida para proporcionar uma instrumentação prática, segura e previsível por meio da técnica recíprocante. Seu design otimizado e tratamento térmico CM permitem a modelagem do canal radicular com apenas um instrumento na maioria das situações clínicas, inclusive em canais curvos. Opera entre 350 e 600 rpm, com torque de 2 N·cm e movimento recíprocante de 150° à esquerda e 30° à direita.

ROTATÓRIA

INSTRUMENTAÇÃO

ALTA PERFORMANCE



SIMPLICIDADE INTELIGENTE. EFICIÊNCIA EM CADA ETAPA.

O sistema de **Limas S** reúne apenas quatro instrumentos para uma instrumentação mais simples, segura e previsível em diferentes anatomias radiculares. Com velocidade de trabalho entre 350 e 600 rpm e torque de 2 N·cm, proporciona maior controle durante o preparo.

Cada instrumento desempenha uma função específica, proporcionando mais eficiência e segurança durante a instrumentação.



ORIFICE SHAPER

#.30/10



#.25/08



PATÊNCIA

#.25/01



ACABAMENTO

#.25/06



ALTA PERFORMANCE

ROTATÓRIA

INSTRUMENTAÇÃO



A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA UMA INSTRUMENTAÇÃO PREVISÍVEL.

O sistema de **Limas S2** oferece uma sequência intuitiva de apenas três instrumentos para uma instrumentação mecanizada mais simples, segura e eficiente. Com velocidade recomendada de 600 rpm e torque de 2 N·cm, proporciona maior controle durante o preparo.



KIT VERMELHO

#.15/10 17mm



#.15/03 25mm



#.25/06 25mm



KIT AMARELO

#.15/10 17mm



#.15/03 25mm



#.20/04 25mm



KIT VERDE

#.15/10 17mm



#.15/05 25mm




#.35/04 25mm





A EVOLUÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO MANUAL EM NITÍ.

As **Limás M** combinam a praticidade da instrumentação manual com a flexibilidade da liga de Níquel-Titânio (NiTi) com tratamento térmico CM, proporcionando mais segurança, previsibilidade e confiança tanto para o aprendizado quanto para a prática clínica.

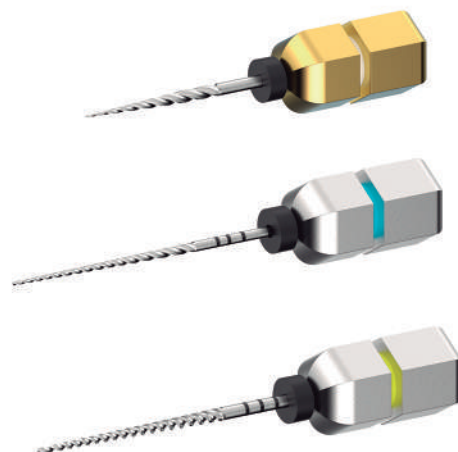

ORIFICE SHAPER

#15.08



#15.10



#.15/03



#.20/03



#.25/03



#.30/03



#.35/03



#.40/03



#.50/03



#.60/03



#.70/03



#.80/03



SHAPER #.03

#.15/05



#.20/05



#.25/05



#.30/05



#.35/05



#.40/05



#.50/05



#.60/05



#.70/05



#.80/05



SHAPER #.05

- Instrumentos manuais em NiTi
- Tratamento térmico CM (Controlled Memory)
- Maior flexibilidade e adaptação às curvaturas dos canais
- Secção transversal com hélices quádruplas
- Instrumentação mais segura e confortável
- Ideal para estudantes e clínicos gerais


MANUAL

PATÊNCIA



PRECISÃO PARA NEGOCIAR OS CASOS MAIS DESAFIADORES.

A **Target 5** foi desenvolvida para facilitar a negociação da patência apical em canais estreitos, atrésicos e calcificados. Seu design exclusivo, aliado ao tratamento térmico de alta performance, proporciona elevada resistência à flambagem, maior controle durante a instrumentação e excelente capacidade de progressão até o comprimento de trabalho.

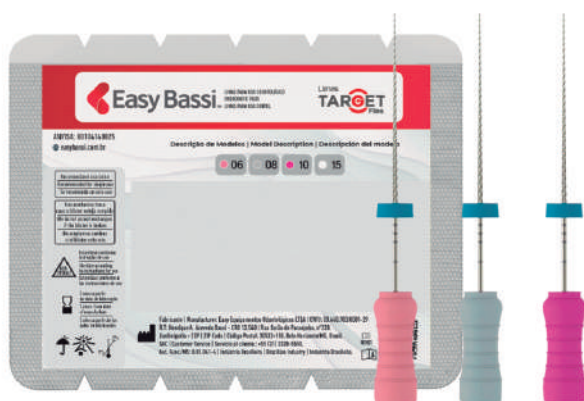

MANUAL

PATÊNCIA



PRECISÃO E RESISTENCIA PARA A NEGOCIAÇÃO DA PATÊNCIA.





A **Target C** foi desenvolvida para facilitar a negociação da patência apical em canais estreitos, atrésicos e calcificados. Fabricada em aço inoxidável e integrante da Linha Target, combina elevada resistência à flambagem, excelente sensibilidade tátil e uma ponta ativa que favorece a progressão segura durante a instrumentação manual.



VERSATILIDADE, PRECISÃO E CONFIANÇA NA INSTRUMENTAÇÃO MANUAL.

A **Target K** é uma lima manual em aço inoxidável desenvolvida para o preparo químico-mecânico dos canais radiculares. Com excelente capacidade de corte, elevada resistência mecânica e ótima sensibilidade tátil, oferece ao profissional controle e eficiência durante todas as etapas da instrumentação.

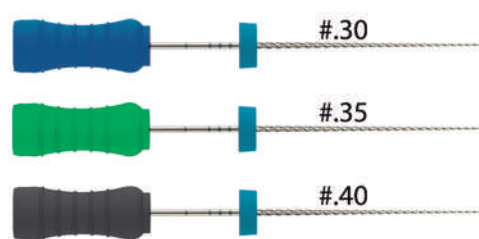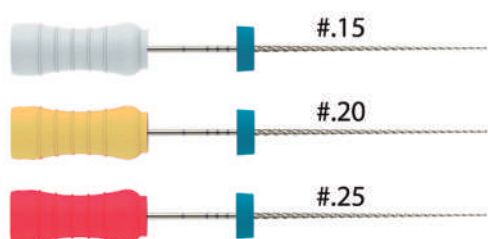

ALTA PERFORMANCE

ROTATÓRIA


RETRATAMENTO



Limas Files

EFICIÊNCIA E SEGURANÇA PARA UMA NOVA OPORTUNIDADE DE TRATAMENTO.

O Sistema **RT** foi desenvolvido para promover a remoção eficiente da guta-percha em procedimentos de retratamento endodôntico. Com geometria específica e tratamento térmico CM, oferece excelente capacidade de corte, elevada flexibilidade e maior controle durante a desobturação. Opera entre 350 e 950 rpm, com torque de 2 N·cm.

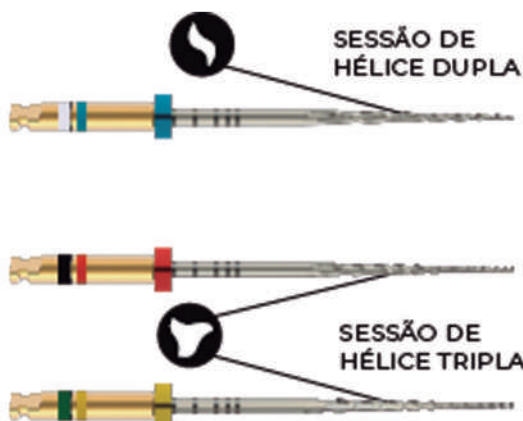



ACESSÓRIOS

Os detalhes que fazem a diferença em cada procedimento

Uma linha completa de acessórios desenvolvida para oferecer mais praticidade, qualidade e eficiência em todas as etapas do tratamento endodôntico.



Lençol de Borracha

EXTRARRESISTENTE



RESISTENTE



Os **Lençóis de Borracha** Easy foram desenvolvidos para proporcionar isolamento absoluto com alta resistência ao rompimento, oferecendo mais segurança, conforto e praticidade durante os procedimentos endodônticos.

Com espessura média e aroma neutro, garante excelente adaptação, proteção dos tecidos moles e um campo operatório limpo e seco, contribuindo para maior previsibilidade clínica.

Cânula Irrigadora



A **Cânula Irrigadora** Easy foi desenvolvida para proporcionar uma irrigação endodôntica mais segura e eficiente. Seu design com saída lateral da solução irrigadora reduz o risco de extravasamento apical, promovendo maior controle durante o procedimento.

Multi Tips



As **Multi Tips** Easy são cânulas plásticas ultrafinas desenvolvidas para proporcionar maior precisão durante os procedimentos endodônticos. Indicadas para aspiração de fluidos dos canais radiculares e irrigação, oferecem excelente desempenho aliado à praticidade clínica.

Cone de Gutta Percha


ESTÉRIL



Os **Cones de Guta-Percha** Easy Bassi proporcionam obturações precisas e seguras. Fabricados conforme os padrões ISO, oferecem excelente compatibilidade com as limas Easy Bassi, garantindo praticidade e previsibilidade clínica.

Cone de Gutta Percha

NÃO ESTÉRIL

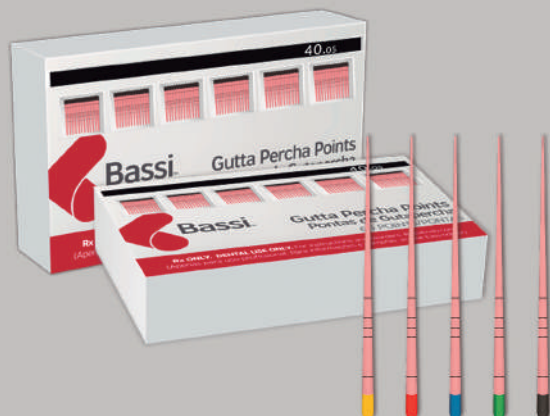

Os **Cones de Guta-Percha** Easy Bassi garantem obturações precisas, seguras e previsíveis. Fabricados conforme os padrões ISO, oferecem excelente compatibilidade com as limas Easy Bassi e contribuem para um selamento eficiente com resultados clínicos confiáveis.

Cone de papel



O **Cone de Papel** Easy Bassi proporciona secagem eficiente dos canais radiculares. Estéril e acondicionado em blisters Cell Pack, é compatível com os Cones de Guta-Percha e limas Easy Bassi, garantindo praticidade e precisão clínica.

Flex Pack



O **Flex Pack** é um condensador mecânico de gutta-percha tipo McSpadden, desenvolvido em liga de Níquel-Titânio (NiTi) para promover uma obturação rápida, segura e altamente eficiente. Seu design com hélices invertidas gera aquecimento por fricção durante a rotação, favorecendo a plastificação da gutta-percha e proporcionando uma compactação tridimensional mais homogênea.

Easy Clean Maxx



O **Easy Clean Maxx** é um instrumento desenvolvido para potencializar a irrigação dos canais radiculares, promovendo maior eficiência na limpeza e na remoção de resíduos durante o tratamento endodôntico.

Projetado para proporcionar uma ativação eficaz das soluções irrigadoras, combina alto desempenho, praticidade e segurança em um único instrumento.


Sua construção reforçada e o novo design facilitam o acesso aos canais, especialmente em regiões posteriores, oferecendo mais conforto ao profissional e previsibilidade clínica.

Kit Condensadores de Níquel Titânio



Os **Condensadores NiTi Easy** foram desenvolvidos para proporcionar maior precisão e controle durante a condensação da guta-percha, especialmente em canais radiculares com anatomias complexas. Fabricados em liga de Níquel-Titânio (NiTi), oferecem alta flexibilidade para canais curvos, além de pontas calibradas e cabo ergonômico em alumínio, garantindo conforto, precisão e segurança durante a obturação. Para preservar as características do material e a integridade do instrumento, não o exponha diretamente ao fogo.

Modelo em resina para treinamento endodôntico

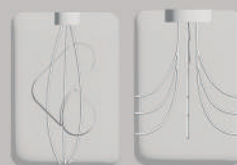

Os **Modelos em Resina** para Treinamento Endodôntico Easy foram desenvolvidos para proporcionar um aprendizado prático, seguro e altamente realista das técnicas endodônticas.

Modelo em resina para treinamento endodôntico



DENTES

Os **Modelos em Resina** para Treinamento Endodôntico Easy oferecem uma experiência realista para que estudantes e profissionais aprimorem suas técnicas em um ambiente seguro e controlado.



QUÍMICOS

Qualidade que sustenta cada etapa

Soluções irrigadoras e auxiliares com o rigor de formulação que dá suporte, do preparo à obturação, ao sucesso do seu tratamento.



Easy Seal

C I M E N T O E N D O D Ô N T I C O



O **Easy Seal** é um cimento endodôntico desenvolvido para proporcionar um selamento eficiente durante a obturação dos canais radiculares. Sua formulação à base de óxido de zinco e eugenol oferece excelente capacidade de vedação, contribuindo para a proteção do sistema de canais e favorecendo o sucesso do tratamento endodôntico.

Curetemp

R E S T A U R A D O R T E M P O R Á R I O

O **CureTemp** é um restaurador temporário fotopolimerizável desenvolvido para proporcionar restaurações provisórias rápidas, seguras e com excelente vedação marginal. Sua formulação à base de resinas dimetacriladas, livre de eugenol, oferece praticidade durante a aplicação e compatibilidade com materiais resinosos.



Easyslide

P A S T A P T C



A **EasySlide** Pasta PTC é um gel lubrificante hidrossolúvel desenvolvido para auxiliar na instrumentação dos canais radiculares. Sua formulação à base de peróxido de carbamida facilita a progressão dos instrumentos, promove a remoção de resíduos pulpares e dentinários e contribui para uma limpeza mais eficiente durante o preparo químico-mecânico.

Lumiglass

IONÔMERO DE VIDRO
FOTOPOLIMERIZÁVEL



O **Lumiglass** é um ionômero de vidro fotopolimerizável, pronto para uso, desenvolvido para oferecer praticidade e excelente desempenho em procedimentos restauradores. Sua formulação proporciona fácil aplicação, ótima adaptação às cavidades e elevada resistência mecânica, tornando-o uma excelente opção para bases cavitárias, pequenas restaurações e reparos.

Sealtemp

OBTURADOR PROVISÓRIO



O **SEALTemp** é um obturador provisório desenvolvido para o fechamento temporário de cavidades em procedimentos restauradores e endodônticos. Sua formulação proporciona excelente vedação marginal, ajudando a prevenir a contaminação do sistema de canais radiculares entre as sessões clínicas e contribuindo para maior segurança durante o tratamento.

EDTA Trissódico

AGENTE QUELANTE



O **EDTA Trissódico** foi desenvolvido para auxiliar no preparo químico dos canais radiculares, promovendo a desmineralização da dentina e a remoção eficiente da smear layer. Sua ação favorece a limpeza do sistema de canais, aumenta a permeabilidade dentinária e contribui para uma instrumentação mais segura e eficaz.

Superdam

BARREIRA GENGIVAL



O **SUPERDAM** é uma barreira gengival fotopolimerizável desenvolvida para proteger os tecidos gengivais durante procedimentos clínicos que exigem isolamento e segurança. Sua formulação proporciona rápida fotopolimerização, excelente adaptação e fácil remoção, oferecendo praticidade ao profissional e conforto ao paciente.

CANAIS DE ATENDIMENTO

 @easybassi

   easybassi

(31) 99811-1277

Serviço Atendimento ao Cliente (SAC)

(31) 99560-5174

Vendas de Equipamentos

 easybassi.com.br